

# DENTAPEN

von Septodont

Das **PERFEKTE SYSTEM**  
für Ihre Praxis

**WELTMARKTFÜHRER IN  
DER SCHMERZKONTROLLE**

Septodont steht seit jeher für innovative Zahnmedizin. Mit einem breiten Produktsortiment und Serviceleistungen unterstützen wir Zahnärzte, Ihren Patienten eine schmerzfreie Behandlung bieten zu können. Dentapen – das perfekte System für Ihre Praxis.



Alle Zubehörteile sind auch separat erhältlich.  
Die Griffaufsätze und Zylinderampullenhalter müssen nach Gebrauch sterilisiert werden.



[www.septodont.de](http://www.septodont.de)



MANAGING  
PAIN FOR  
**YOUR**  
PRACTICE

**DENTAPEN,  
DIE NEUE GENERATION  
COMPUTERGESTEUERTER  
DENTALER  
INJEKTIONSSYSTEME**

- Perfekt für Ihre Praxis
- Perfekt für Ihre Patienten
- Perfekt für Ihre Praxisroutine

CCLAD-TECHNOLOGY\*

# VON ZAHNÄRZTEN GETESTET UND FÜR GUT BEFUNDEN!

In einer Studie zeigte sich eine deutliche Reduktion des Schmerzempfindens bei Injektionen, die mittels CCLAD-System verabreicht wurden\*\*.

**96 %**  von 50 Zahnärzten, die selbst eine palatinale Injektion erhielten, bevorzugten die computergesteuerte gegenüber der herkömmlichen Spritze.

Zwei- bis dreimal weniger Schmerzen gegenüber herkömmlichen Spritzen.

\* CCLAD (Computer-Controlled Local Anesthesia Device)

\*\* Hochman MN, Chiarello D, Hochman CB, Lopatkin R, Pergola S. Computerized Local Anesthesia Delivery vs. Traditional Syringe Technique. NY State Dent J. 1997;63:24-9.



## LEICHTHÄNDIGE INJEKTION

Perfekt für Ihre Bedürfnisse

-  **Ergonomisch** und leicht (40g)
-  **Kompatibel** mit jeder Injektionskanüle
-  Zwei Griffaufsätze für **Spritzen-** oder **Stifthalung**



SPRITZENHALTUNG




STIFTHALTUNG

## PRAKTISCH

Sichere standardisierte Injektion

-  **Kabellos** freies Handling
-  **Kein zusätzliches Gerät** platzsparend
-  **Keine Fußsteuerung** volle Konzentration auf die Injektion

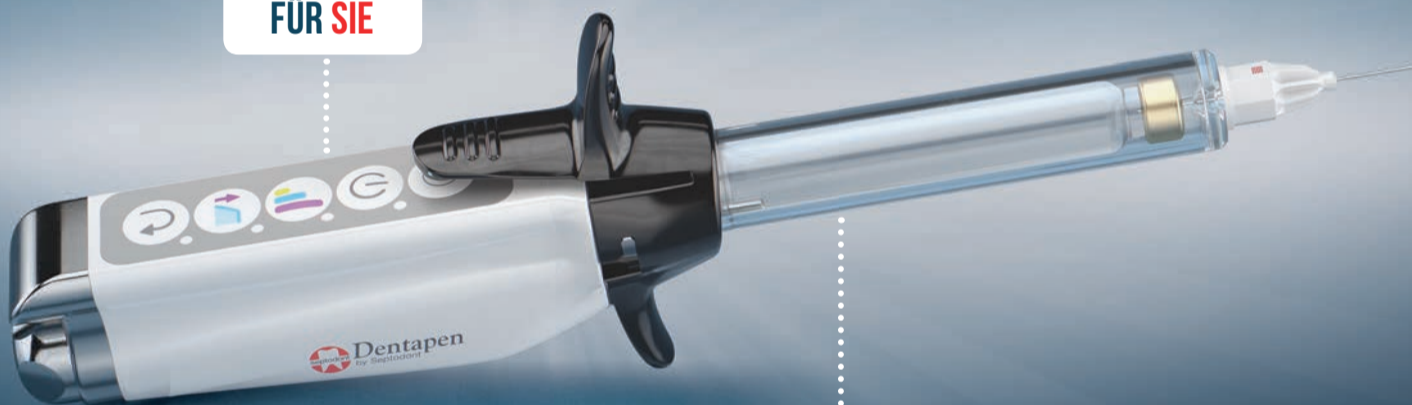


FÜR SIE



FÜR IHRE PATIENTEN






## SCHMERZFREIE INJEKTION

Mehr Patientenzufriedenheit und weniger Angst

-  **Kontrollierte Mengenabgabe** 2 Abgabemodi inkl. ILA
-  **3 Injektionsgeschwindigkeiten**
-  **Klein und modern** weniger Angst vor der Spritze

### INTUITIVE ANWENDUNG

## 5 SELBSTERKLÄRENDE BUTTONS MIT FINGERDRUCK AKTIVIEREN

-  **Aktivierungsbutton** für die Abgabe des Lokalanästhetikums mit automatischer Selbstaspiration
-  **Ein / Aus** mit Batteriestandsanzeige
-  **Auswahl Injektionsgeschwindigkeit**  
Schnell: 1ml / 30s | Mittel: 1ml / 60s | Langsam: 1 ml / 90s
-  **Auswahl Abgabemodus**
  - ILA-Modus: geringste Geschwindigkeit, höchste Intensität
  - Inkrementeller Modus: Abgabemenge anfangs ansteigend, dann konstant
-  **Zurücksetzen**  
Die Kolbenstange wird zurückgefahren, die nächste Zylinderampulle kann eingelegt werden